


Durante más de 75 años, Hill-Rom se ha preocupado del entorno del cuidado. En un estudio reciente\*, nueve de cada diez hospitales informan contar con una cama de parto Hill-Rom. Este tipo de experiencia marca la diferencia. Es la diferencia de Hill-Rom.



## Cama de parto Affinity® 4.

La revolucionaria cama de parto diseñada para brindar mayor comodidad y seguridad.

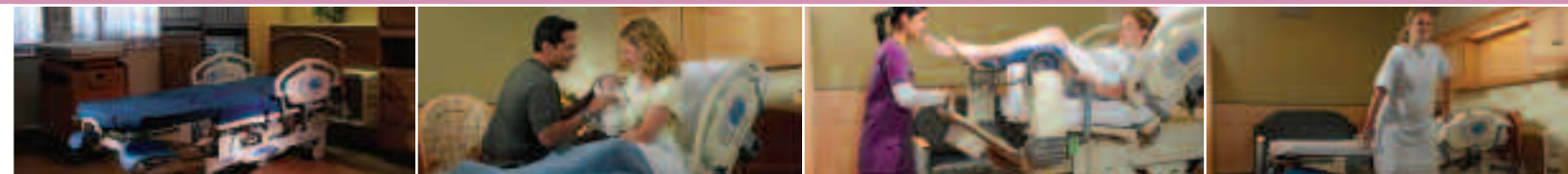

### Cama de parto Affinity® 4 (P3700) Especificaciones técnicas

#### Largo de la cama

Total .....229 cm (90")

#### Ancho de la cama

Barandas arriba .....99 cm (39")

Barandas abajo .....91 cm (36")

#### Altura de la cama

Baja (con colchón) .....58 cm (23")

Alta (con colchón) .....99 cm (39")

Altura máxima de la sección del asiento  
(en posición similar a la Trendelenburg) .....102 cm (40")

#### Colchón

Largo .....198 cm (78")

Ancho .....89 cm (35")

Grosor (zona de la cabeza) .....12,7 cm (5")

Grosor (sección de pie de cama) .....8,9 cm (3,5")

#### Ángulos críticos

Elevación máxima de la cabecera .....63°

Elevación máxima del asiento .....15°

Posición máxima similar a la Trendelenburg .....8°

#### Capacidad máxima de elevación

Cama .....227 kg (500 lb.)

Sección de pie de cama .....181 kg (400 lb.)

Tamaño de las ruedas .....15 cm (6")/20 cm (8")

Peso de la cama .....218 kg (480 lb.)

#### Funciones convencionales

- Batería de reserva
- Luz nocturna automática
- Inclinación automática del asiento
- 4 ruedas Tente® con bloqueo
- Recipiente para líquidos
- Accionamiento instantáneo de RCP
- Asas para trabajo de parto instantáneo
- Accionamiento de barandas OneStep®
- Sección de pie de cama desmontable
- Rueda convencional de 15 cm (6")
- Sección de pie de cama levadiza o Stow and Go™
- Superficie con corte en V o de canto en línea recta
- Cabecera de material termo-moldeado
- Freno y dirección centrales
- Control e indicador de bloqueo
- Soporte IV
- Posición similar a la Trendelenburg
- Soportes para los pies

#### Accesorios

- Barra para trabajo de parto
- Control de mando colgante
- Cortinas desechables
- Cubierta deslizante para la sección de pie de cama
- Cubierta deslizante para la zona de la cabeza
- Kit de gancho para sonda Foley
- Marco de anestesia
- Sábanas
- Sistema de SSI
- Soporte IV permanente
- Soporte para el tanque de O2
- Soportes acoplados para pierna completa
- Soportes acoplados para pantorrillas
- Soportes IV
- Soportes telescópicos para pantorrillas
- Soportes telescópicos para pierna completa
- Tablero para brazos

#### Opciones

- Sistema de soporte neumático
- Voltaje: 120 AC ó 230 AC
- Variedad de cabeceras de madera
- Controles del sistema de comunicación Sidecom®

\* Estudio de mercado Hill-Rom; en archivo.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom otorga es la garantía escrita expresa que otorga al vender o alquilar sus productos. © 2006 Hill-Rom Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

145508 8/08/07




La única cama de parto que usted necesita.  
La cama de parto Affinity® 4.



La innovadora sección de pie de cama Stow and Go™ se guarda debajo de la cama y se saca fácilmente.

Los soportes para pantorrillas OneStep® son de mayor tamaño, con una resistente palanca de accionamiento que se puede usar con una sola mano desde cualquier ángulo.

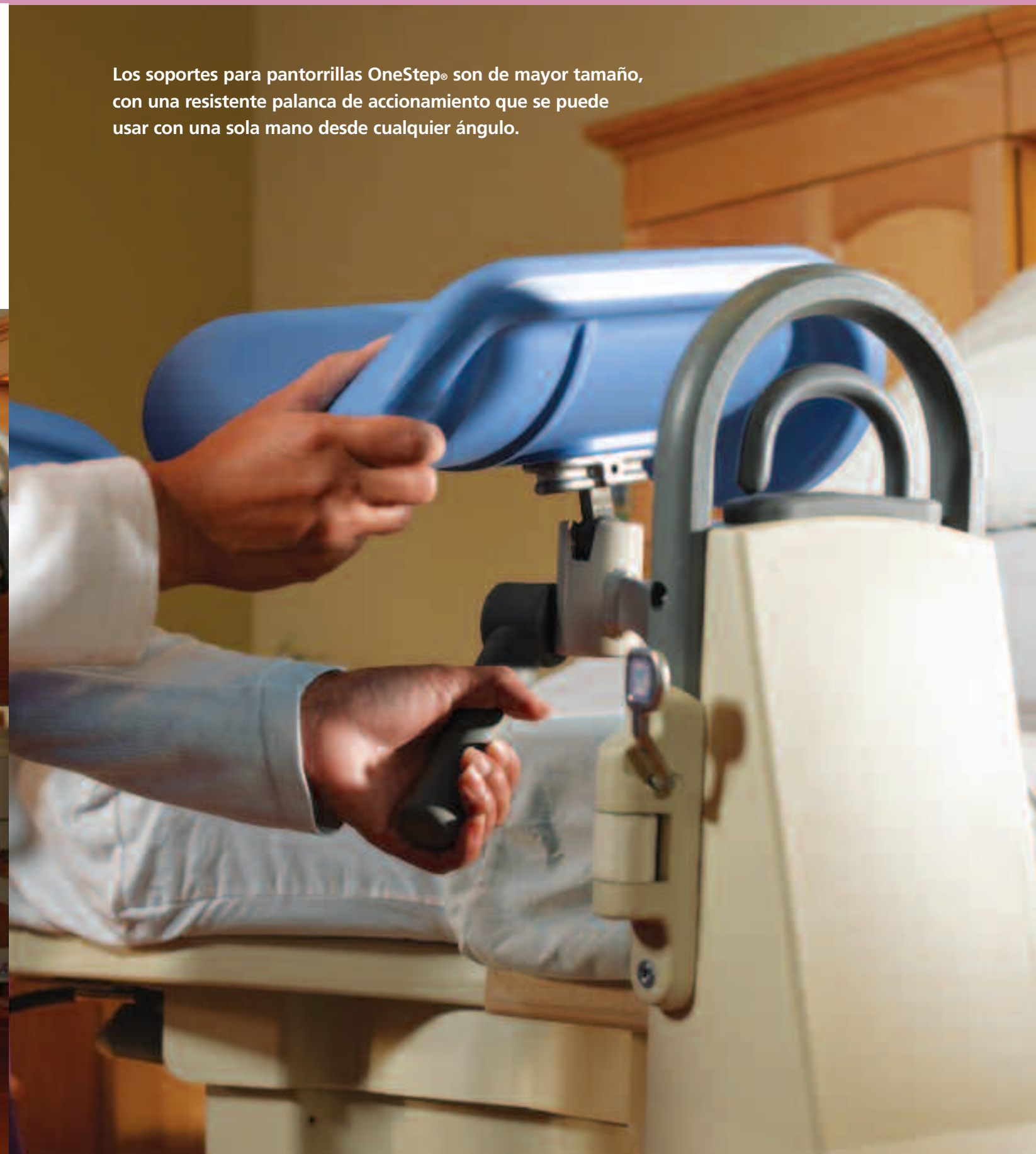



La cama Affinity® 4 incluye docenas de funciones de **seguridad** en el costado.



### Seguridad y comodidad.

Diseñamos cada detalle de la cama de parto Affinity 4 para que le ayude a tener una experiencia de parto más segura, tanto para usted como para su paciente.

- La **sección de pie de cama** se bloquea firme y fácilmente.
- Los soportes para pantorrillas **EasyGlide®** se doblan hacia la posición correcta y se bloquean firmemente con una sola palanca.
- Un resistente **mecanismo de la posición Trendelenburg**, con resortes y sellos mejorados, convierte el bajar y levantar la cama en un sencillo trabajo de una persona.
- Las **almohadas hinchables con aire** del respaldo y el asiento disminuyen la necesidad de volver a colocar en posición de parto a la paciente.
- **Cuatro ruedas con doble bloqueo** mantienen fija la cama.
- El **colchón de espuma Comfortline®**, más grueso y que reduce la presión, brinda mayor apoyo, especialmente en el área vulnerable del asiento.
- La **inclinación pélvica automática** y el **colchón con corte en V** opcional brindan mejor acceso a la zona de parto de la paciente.

Nuestra cama de parto es la combinación perfecta de **seguridad y facilidad de uso.**

En el parto y el alumbramiento, cada segundo cuenta, por lo que es necesario actuar rápida y fácilmente, especialmente en una emergencia. La cama de parto Affinity® 4 cumple la promesa de una cama segura y elegante, que funciona fácilmente en los ambientes más ajetreados.

Adiós a las complicaciones con la sección de pie de cama desmontable. ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo se vuelve a instalar? Con la función Stow and Go™ de Affinity 4, la sección de pie de cama integrada simplemente se desliza bajo la cama para el parto y se vuelve a acoplar después. Por otro lado, si escoge nuestra versión levadiza diseñada ergonómicamente, sólo guarde la sección de pie de cama en el estante incorporado.

Con la cama de parto Affinity 4, hicimos docenas de mejoras a la calidad, grandes y pequeñas, desde las ruedas con doble bloqueo hasta los soportes más resistentes para pantorrillas.

### En resumen

#### Fácil de usar

- Sección de pie de cama sin elevación Stow and Go™
- Batería de reserva
- Sin hueco en el traslado del paciente
- Mecanismo de la posición Trendelenburg fácil de usar accionado por gas
- Accionamiento de barandas OneStep®

#### Seguridad para pacientes y cuidadores

- Sección de pie de cama fácilmente deslizable
- Soportes para pantorrillas EasyGlide® más resistentes
- Cuatro ruedas con doble bloqueo mantienen bien fija la cama
- Colchón Comfortline® con espuma que reduce la presión
- Inclinación pélvica automática que reduce el desplazamiento del paciente
- Perímetro despejado alrededor de la cama, sin zonas que sobresalgan
- Sección levadiza opcional, diseñada ergonómicamente

Las asas y barandas, diseñadas considerando las necesidades de la paciente, facilitan levantarse y desplazarse.



La inclinación pélvica automática hasta 15 grados mantiene fija a la paciente durante el parto y mejora su posición.



También hay disponible una sección de pie de cama levadiza opcional. Liviana y fácil de manejar, la sección de pie de cama se guarda en un estante incorporado.





Otras camas



Basta de buscar tomacorrientes. La **batería de reserva** permite utilizar las funciones de la cama incluso si está lejos de un tomacorriente.

Cama Affinity® 4



La cama Affinity® 4 está diseñada para que todos los movimientos sean más rápidos y sencillos.



#### Menos tiempo, menos complicaciones.

En el parto y el alumbramiento, el tiempo del personal es escaso. Nadie puede darse el lujo de perder minutos buscando equipo o un tomacorriente, ni usando controles complicados. La cama Affinity® 4 está diseñada para reducir las complicaciones que usted enfrenta día a día.

- La sección de pie de cama **Stow and Go™** se desliza y guarda debajo de la cama sin necesidad de levantarla, y se vuelve a acoplar fácilmente sin fijaciones falsas ni interferencia con las sábanas.
- Con la **batería de reserva**, puede utilizar todas las funciones de la cama, como cambiar de altura y posición, aunque esté lejos de un tomacorriente, permitiendo decidir rápidamente si efectúa una operación ante una situación crítica.
- El **mecanismo de la posición Trendelenburg** accionado por gas permite la elevación de la cabecera para bajar inmediatamente hasta los 8 grados.
- El accionamiento de barandas **OneStep®** permite un traslado del paciente sin hueco, más seguro y sencillo.
- El **diseño aerodinámico de la cama**, con todo el equipo guardado completamente dentro del perímetro (en lugar de sobresalir de éste), lo protege mientras se desplaza alrededor del paciente.

